



Craft Bio

PETUNJUK PENGGUNAAN

CRAFTBIO THERMO SHAKER INCUBATOR

CBTS-300



DISTRIBUTOR :

PANDUAN INI HARUS DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA PRODUK.

PENGGUNA :

BACA PENTUNJUK PENGGUNAAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK.
SIMPAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK REFERENSI DI MASA
MENDATANG.

KATA PENGANTAR

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih karena Anda sudah bersedia membeli **CRAFTBIO THERMO SHAKER INCUBATOR**. Petunjuk penggunaan ini menguraikan seluruh informasi mengenai tipe ini bagi Anda, termasuk desain, dimensi, instruksi penggunaan, pemeliharaan, kemasan, transportasi, dan penyimpanan. Anda sangat disarankan untuk membaca panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.

Kesalahan-kesalahan dalam proses pencetakan tidak bisa dihindari. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan seperti itu yang dikarenakan alasan-alasan diluar kendali. Kami berhak untuk membuat modifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda bisa menemukan beberapa konten yang berbeda dari penggunaan produk yang sebenarnya.

Dalam hal ini, PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur akan disebutkan sebagai produsen pada penulisan selanjutnya dan PT GeneCraft Labs akan disebutkan sebagai distributor pada penulisan selanjutnya.

Silakan hubungi kami jika Anda menemukan adanya kesalahan dalam petunjuk penggunaan ini.

Sebelum menggunakan produk, Anda disarankan untuk:

1. Pastikan bahwa semua bagian dan dokumentasi dikemas sebelum pemasangan. Silakan hubungi distributor atau produsen jika ada yang tertinggal.
2. Sebelum penggunaan, silakan baca dokumen dan data terlampir dengan hati-hati dan biasakan diri Anda dengan alat ini. Panduan harus disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Produsen dan distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada instrumen karena kesalahan dalam penggunaan, dan juga potensi kerusakan setelahnya.
3. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional.

INFORMASI UMUM

Tabel 1 Informasi Umum

Nama Produk	CraftBio Thermo Shaker Incubator
Merk Produk	CraftBio
Tipe Produk	CBTS-100
Produsen	PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jl Pinang Blok F23 - 15B, Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia
Distributor	PT GeneCraft Labs Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 - Indonesia
Edisi	Pertama, Tahun 2024
Revisi	0.0

DEKLARASI KESESUAIAN

Produsen menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan standar :

1. **SNI IEC 61010-1:2016** tentang Persyaratan keselamatan perlengkapan listrik untuk penggunaan pengukuran, kontrol dan laboratorium.
2. **ISO 14971:2019** tentang Penerapan manajemen risiko pada alat kesehatan.

PENJELASAN PENANDAAN

Simbol penandaan berikut dilampirkan pada label produk dan kemasannya.

Tabel 2 Simbol penandaan label produk dan kemasannya

Simbol	Penjelasan
	Pemberitahuan peringatan yang menunjukkan risiko cedera atau kerusakan pada kesehatan
	Baca instruksi pada petunjuk penggunaan
	Produsen / Pabrikan
	Tidak ada kontak listrik dengan pengguna
	Baca instruksi kerja sebelum digunakan
	Jaga agar tetap kering
	Petunjuk posisi atas dan bawah agar produk tidak terbalik
	Petunjuk untuk produk yang mudah pecah dan tangani dengan hati-hati
	Jauhkan dari sinar matahari
	Dilarang membolak-balikkan produk
	Batas suhu

INFORMASI GARANSI

Garansi ini hanya diberikan kepada pembeli asli yang membeli produk baru/belum terpakai dari produsen atau distributor yang ditunjuk. Garansi ini tidak diperpanjang oleh orang atau badan lain dan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pembeli atau pemilik berikutnya. Cakupan dalam garansi ini tidak berlaku pada penjualan berikutnya atau dipindahtangankan ke orang lain.

Produsen menjamin komponen mekanik dan listrik produk ini ketika dibeli baru dan tidak terpakai bebas dari cacat bahan dan pengerjaan selama jangka waktu 24 bulan dari tanggal pembelian dari produsen atau distributor, dengan salinan tagihan penjualan diperlukan sebagai bukti untuk cakupan dalam garansi ini. produsen menjamin bahwa setiap produk bebas dari cacat material dan produksi sepanjang digunakan secara normal selama masa garansi.

Garansi dapat diklaim jika kerusakan yang menurut pemeriksaan teknisi kami disebabkan oleh kesalahan produsen. Garansi meliputi ongkos kerja dan suku cadang.

Garansi tidak berlaku untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian (tidak sesuai dengan buku petunjuk penggunaan), penyalahgunaan pemakaian dan akibat bencana alam.
2. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional. Jika produk rusak karena digunakan oleh pengguna yang tidak sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut diluar tanggungan produsen dan distributor.
3. Penyimpanan yang tidak sesuai petunjuk.
4. Kerusakan penggunaan tidak wajar.
5. Barang dan aksesoris hilang.
6. Tidak melampirkan bukti / kuitansi pembelian

LAYANAN PURNA JUAL

Ketika Anda membutuhkan dukungan produk:

- Untuk dukungan lebih lanjut silakan menghubungi **Hotline Distributor** ((021) 5890 3119).

Sebelum menghubungi **Hotline Distributor**, mohon untuk mempersiapkan informasi berikut:

- Kartu garansi
- Bukti / kwitansi pembelian
- Merk/tipe dan nomor seri produk
- Masalah produk

PERSYARATAN KESELAMATAN

Petunjuk penggunaan menggunakan persyaratan berikut :

1. Catatan

Baca petunjuk penggunaan ini untuk digunakan dengan hati-hati dan simpan untuk digunakan nanti, pastikan untuk membuatnya dapat diakses oleh pengguna lain dan amati informasi yang tertera pada petunjuk penggunaan.

2. Perhatian

- Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instrumen harus sesuai dengan panduan dasar dan peringatan yang disebutkan di bawah ini. Jika Anda tidak mematuhi, maka akan berdampak pada masa pakai instrumen yang dijadwalkan dan perlindungan yang diberikan. relatif 30%~75% Kisaran tekanan atmosfer 700hPa~1060hPa.
- Produk ini adalah instrumen dalam ruangan.
- Operator tidak boleh membuka atau memperbaiki sendiri Instrumen, yang akan mengakibatkan hilangnya kualifikasi jaminan perbaikan atau terjadinya kecelakaan. Jika ada yang salah dengan Instrumen, perusahaan akan memperbaikinya.
- Pembumian daya AC harus andal untuk melindungi dari sengatan listrik. Steker 3-pin yang disertakan dengan kabel daya thermo-shaker adalah perangkat pengaman yang harus disesuaikan dengan soket yang dibumikan.
- Selama pengoperasian normal, suhu blok logam akan sangat tinggi. Akan terjadi luka bakar atau mendidihnya cairan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyentuh Instrumen ini dengan bagian tubuh mana pun agar tidak melepuh.
- Tutup tabung reaksi sebelum memasukkan tabung reaksi ke dalam balok. Cairan dapat tumpah ke dalam balok atau ke perangkat jika tutup tabung dibuka, yang akan merusak balok atau perangkat.

- Sebelum menyalakan, pastikan voltase yang digunakan sesuai dengan voltase yang dibutuhkan, dan beban terukur stopkontak listrik tidak boleh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Jika kabel listrik rusak, Anda harus menggantinya dengan jenis yang sama. Anda harus memastikan tidak ada apa pun pada kabel listrik dan Anda tidak boleh meletakkan kabel listrik di tempat yang tidak seharusnya. Pegang dongkrak saat Anda mencabut kabel listrik, dan jangan mencabut kabel listrik.
- Instrumen harus diletakkan di tempat bersuhu rendah, sedikit debu, tidak ada air, tidak ada sinar matahari atau lampu yang terang. Selain itu, tempat tersebut harus memiliki aerasi yang baik, tidak ada gas yang bersifat korosif atau medan magnet yang kuat, jauh dari pemanas sentral, kompor perkemahan, dan sumber panas lainnya. Jangan meletakkan Instrumen di tempat yang basah dan berdebu. Ventilasi pada Instrumen dirancang untuk aerasi. Jangan menutup atau menutup ventilasi agar terhindar dari suhu tinggi. Jika Anda menggunakan lebih dari satu Instrumen secara bersamaan, jarak antara keduanya harus lebih dari 100 cm.
- Sakelar listrik berada di bagian belakang perangkat, tekan “I” untuk menghidupkan perangkat, dan tekan “O” untuk mematikan perangkat.
- Matikan daya saat Anda selesai bekerja. Cabut steker konektor saat Instrumen tidak digunakan dalam waktu lama dan tutupi dengan kain atau kertas plastik untuk mencegah debu.

3. Peringatan

- Menggunakan ponsel atau peralatan radiasi frekuensi radio lainnya di dekat peralatan dapat menyebabkan masalah pengoperasian yang tidak terduga atau tidak normal. Jika ada sumber radiasi frekuensi radio di dekatnya, kondisi kerja peralatan harus dipantau.
- Matikan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Cabut steker konektor apabila instrumen tidak digunakan dalam waktu lama dan tutupi dengan kain atau kertas plastik agar tidak berdebu.

- Cabut steker konektor dari soket sekaligus dalam kasus berikut ini, dan hubungi vendor:
 - Ada cairan yang mengalir ke dalam instrumen.
 - Basah kuyup atau terbakar api.
 - Pengoperasian yang tidak normal: seperti suara atau bau yang tidak normal.
 - Instrumen terjatuh atau cangkang luar rusak.
 - Fungsinya jelas sudah berubah.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	8
BAB 1 PENGENALAN PRODUK	9
1.1 PENJELASAN PRODUK	9
1.2 SPESIFIKASI TEKNIS	10
BAB 2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK	11
2.1 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK	11
2.1.1. PANEL KONTROL	11
2.1.2. FUNGSI TOMBOL.....	12
2.1.3. CARA MEMATIKAN FUNGSI SUHU, KECEPATAN, DAN WAKTU	13
2.1.4. PENGATURAN SINGLE TEMPERATUR, SPEED DAN TIMING SETTING	14
2.1.5. CARA MODE SHORT MIX.....	15
2.1.6. TEMPERATURE CALIBRATION.....	15
2.1.7. CARA MENUKAR BLOCK	17
2.2 PENJELASAN & PENANGANAN FUNGSI ERROR.....	18
BAB 3 PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN	20
3.1 TATA CARA PEMBERSIHAN PRODUK.....	20
BAB 4 KONSULTASI DAN PELAYANAN	21

BAB 1 PENGENALAN PRODUK

1.1 PENJELASAN PRODUK

Thermo shaker untuk tabung mikro merupakan instrumen ideal untuk pencampuran sampel secara intensif dalam kondisi suhu yang diatur. Mode pencampuran dan pemanasan dapat digunakan secara bersamaan dan terpisah, yaitu, perangkat dapat berfungsi sebagai shaker dan termostat. Badan utama Blok Pencampur dapat digunakan dengan berbagai jenis blok. MS-100 dapat digunakan untuk analisis DNA, ekstraksi lipid dan komponen sel lainnya, pembuatan pustaka DNA, amplifikasi PCR, pradenaturasi dalam elektroforesis, pemadatan serum, dll.

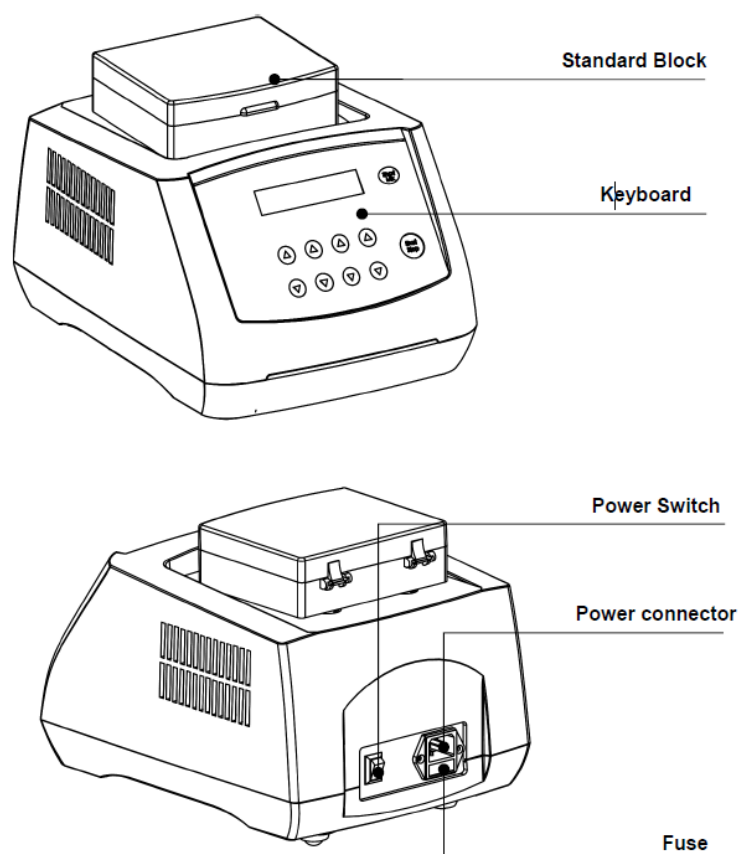

Gambar 1 Bagian-Bagian Produk

1.2 SPESIFIKASI TEKNIS

Tabel 3 Spesifikasi Teknis


Deskripsi produk	Craft Bio Thermo Shaker Incubator
Tipe	CBTS-100
Material	Plastik ABS
Tegangan	220 VAC
Frekuensi	50 Hz
Suhu operasional / kelembaban	5°C - 35 °C / < 70%
Suhu penyimpanan / kelembaban	5°C - 40 °C / < 70%
Mixing Rate	200 ~ 1500 RPM
Orbit	2 mm
Temperatur Setting Range	5°C - 100°C
Timing Range	1min ~ 99h 59min
Akurasi Temperatur	≤0.5°C
Standard Block	▪ A-BLOCK : 96 x 0.2 ml ▪ B-BLOCK : 54 x 0.5ml ▪ C-BLOCK : 35 x 1.5ml ▪ D-BLOCK : 35 x 2.0ml ▪ E-BLOCK : 20 x 1.5ml + 15 x 0.5ml ▪ F-BLOCK : 24x ≤Φ12mm Tube ▪ G-BLOCK : 12 x 15ml Falcon ▪ H-BLOCK : 6 x 50ml Falcon ▪ I-BLOCK : 103 x 67 x 30mm Bath Block ▪ J-BLOCK : 96 x 0.2ml Micro-plate ▪ K-BLOCK : 24 x 5ml Tube ▪ L-BLOCK : 96-Deep Well Plate
Dimensi	300 (P) × 220 (L) × 195 (T)
Berat Produk	7 Kg

BAB 2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK

2.1 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK

Tata cara penggunaan Craft Bio Thermo Shaker meliputi pengaturan single temperature, kecepatan dan waktu. Dalam pengaturan tersebut dapat dilihat pada gambar panel dibawah ini :

2.1.1. PANEL KONTROL

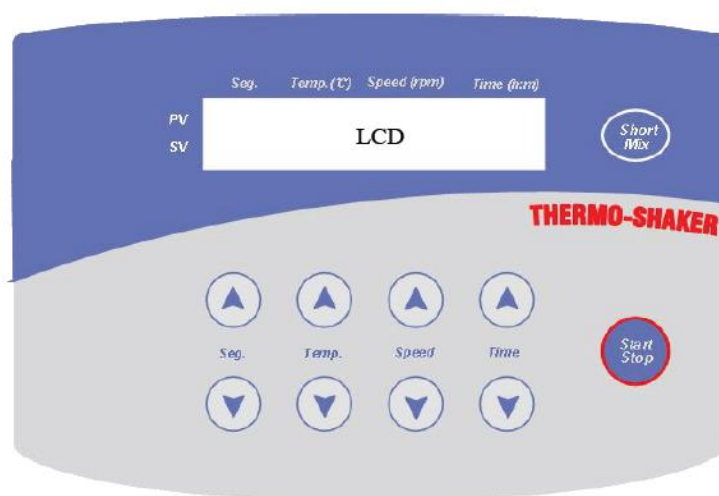

Gambar 2 Panel Kontrol

Section in run	Current temperature	Current speed	Remnant time
S1	100.0	1200	10:30
S1	100.0	1200	15:00
Setting Section	Setting temperature	Setting speed	Setting time

Gambar 3 Keterangan Panel Kontrol

2.1.2. FUNGSI TOMBOL

Tabel 4 Fungsi Tombol

Tombol	Fungsi
Seg. ▲ ▼	Untuk memilih Bagian prosedur: Lima titik Bagian sebagai S1, S2, S3, S4, S5.
Temp. ▲ ▼	Tombol pengaturan suhu. Menekan “▲” atau “▼” untuk mengatur suhu operasi. Untuk mengatur suhu, tekan “▲” atau “▼” terus-menerus, yang lebih cepat dan nyaman.
Speed ▲ ▼	Tombol pengaturan kecepatan. Menekan tombol “▲” atau “▼” untuk mengatur kecepatan pencampuran. Untuk mengatur kecepatan pencampuran, tekan tombol “▲” atau “▼” terus-menerus, yang lebih cepat dan praktis. Setiap kali tombol ditekan, kecepatan pencampuran berubah sebesar 10rpm.
Time ▲ ▼	Tombol pengaturan waktu. Menekan tombol “▲” atau “▼” untuk mengatur jam waktu. Untuk mengatur jam waktu, tekan tombol “▲” atau “▼” terus-menerus, yang lebih cepat dan praktis.
Short Mix	Perangkat akan melakukan pencampuran pada frekuensi yang terlihat di layar selama tombol “Short Mix” ditekan. Waktu dihitung dalam detik hingga 999S berakhir.
Start/Stop	Tombol stop/start. Menekan tombol ini untuk menghentikan atau memulai prosedur. Menekan sebentar untuk memulai, Menekan terus-menerus untuk menghentikan.

2.1.3. CARA MEMATIKAN FUNGSI SUHU, KECEPATAN, DAN WAKTU


a) LCD akan menampilkan gambar sebagai grafik saat instrumen dinyalakan dan instrumen masuk ke keadaan awal dengan suara “du...”.

b) Sekitar 6 detik, jendela tampilan untuk suhu praktis menunjukkan 30,0, yang merupakan suhu praktis blok. Suhu pengaturan menunjukkan 37,0, yang merupakan suhu pembentukan. Sementara 10:00 adalah waktu pengaturan waktu sebelumnya, dan S1 adalah bagian suhu sebelumnya. Satuan suhu adalah “°C”, satuan kecepatan adalah “RPM” dan satuan waktu adalah “jam:menit”.

c) Menekan Temp “▲” atau “▼”, nilai jendela tampilan untuk pengaturan suhu akan meningkat atau berkurang dari digit desimal, digit satuan, digit puluhan hingga digit ratusan.


Tekan tombol Kecepatan atau Waktu “▲” atau “▼”, untuk mengatur kecepatan campuran atau waktu pengaturan sesuai dengan aturan transformasi yang sama di atas.

Di samping itu, menekan “▲” atau “▼” selama 2 detik secara terus-menerus dapat mengubah digit dari desimal ke satuan, dari satuan ke digit puluhan, dari digit puluhan ke digit ratusan dengan cepat.

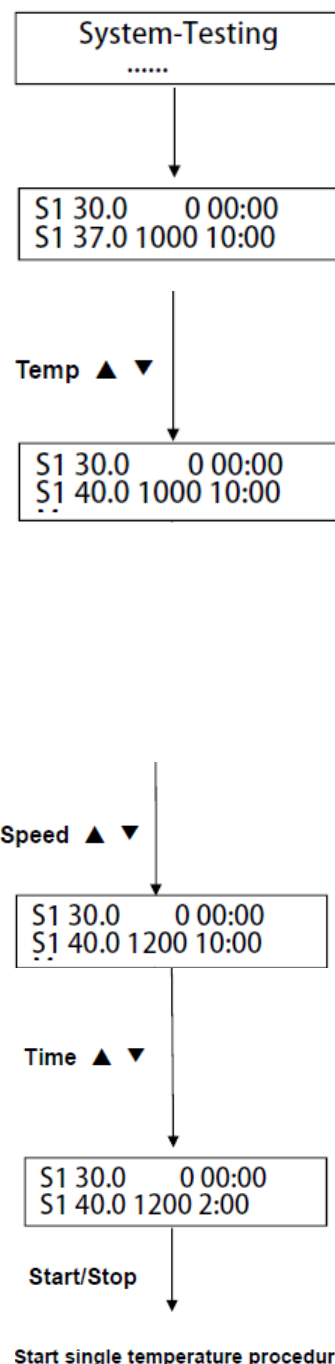

Jika Anda ingin menyetel suhu ke 40,0°C, kecepatan campuran ke 1200 rpm, waktu pengaturan waktu ke 2 jam, tekan tombol temp “▲” terus-menerus untuk membiarkan suhu mencapai 40,0, suhu akan dikonfirmasi dan disimpan sekaligus. Tekan tombol Speed “▲” terus-menerus untuk membiarkan kecepatan campuran mencapai 1200 rpm, Sementara itu tekan tombol time “▼” terus-menerus untuk membiarkan waktu pengaturan waktu mencapai 02:00, suhu akan dikonfirmasi dan disimpan sekaligus juga. Setelah menyelesaikan pengaturan program S1, tekan tombol “stop/start” untuk menjalankan program S1.

- d) Tekan seg. “▲” atau “▼” untuk memilih satu bagian S1, S2, S3, S4, S5. Kemudian atur nilai suhu, kecepatan, dan waktu sesuai dengan langkah (C). Anda dapat mengatur kelima titik ini sebagai titik segmen biasa, kapan pun Anda ingin menggunakannya, Anda dapat mentransfer salah satunya.

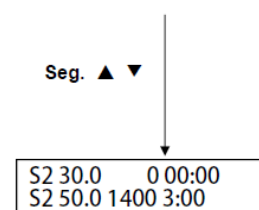

2.1.4. PENGATURAN SINGLE TEMPERATUR, SPEED DAN TIMING SETTING

- a) Tekan tombol Seg “▲” atau “▼” untuk Memilih satu bagian dari S1, S2, S3, S4, S5.
- b) Tekan tombol Temp “▼”, nilai terendah menampilkan “OFF”, dan perangkat tetap berada pada suhu ruangan. Tekan juga tombol Speed atau Time “▼”, nilai terendah menampilkan “OFF”, Speed menampilkan “OFF”, artinya tidak ada fungsi pencampuran. Time menampilkan “OFF”, artinya tidak ada fungsi pengaturan waktu, waktu pengaturan waktu adalah ∞, jika tombol start/stop ditekan, akan menampilkan “CON” dengan kedipan.


2.1.5. CARA MODE SHORT MIX

- a) Perangkat akan melakukan mixing pada frekuensi yang terlihat di layar selama tombol "Short Mix" ditekan. Waktu dihitung dalam detik hingga 999 detik telah berlalu. Kecepatan Short Mix maksimum dapat diatur sesuai dengan kebutuhan Anda di bagian saat ini.

Short Mix 600rpm	is running 023S
---------------------	--------------------

2.1.6. TEMPERATURE CALIBRATION

Suhu Instrumen telah disesuaikan sebelum terjual habis. Namun, jika terjadi penyimpangan antara suhu aktual dan suhu yang ditampilkan karena beberapa alasan, Anda dapat melakukan hal berikut untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

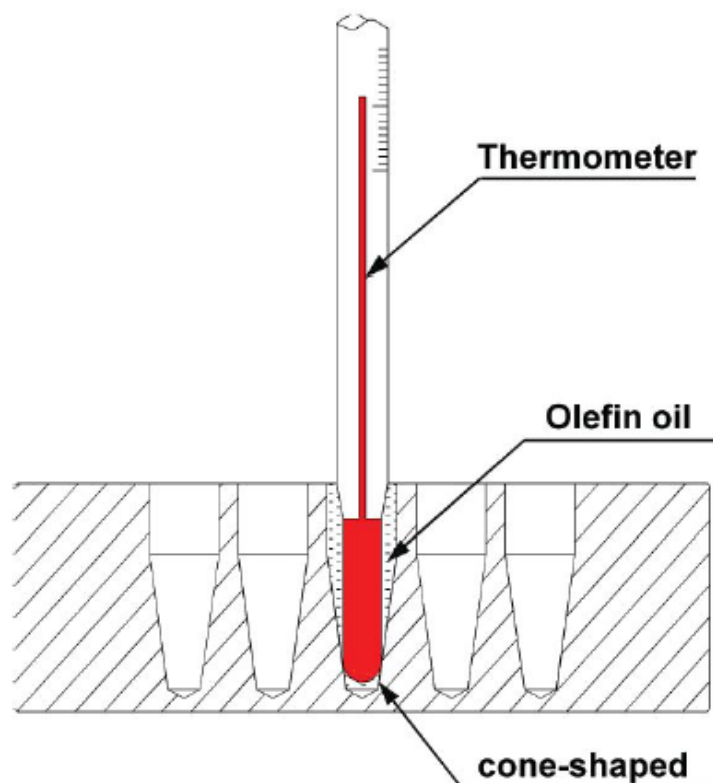


Gambar 3 Keterangan Panel Kontrol

Metode Adjustmen dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut :

- Setelah Instrumen dinyalakan, ia memasuki antarmuka tunggu. Pastikan suhu pada layar berada di bawah 30°C. Jika suhu lebih tinggi dari 30°C, Anda harus menunggu hingga suhu berada di bawah 30°C.
- Suntikkan minyak olefin ke dalam salah satu sumur berbentuk kerucut, lalu masukkan termometer ke dalam sumur ini (Pastikan presisi termometer berada dalam 0,1°C dan bola suhu benar-benar terendam dalam sumur berbentuk kerucut).
- Tekan tombol “▲” dan “▼” pada Seg secara bersamaan, suhu praktis menunjukkan 20,5, dan naik ke 40,0 sekaligus, pada saat yang sama tanda “ ” berkedip terus-menerus. Ketika suhu praktis mencapai 40,0, tanda “ADJ” dan “ ” berkedip terus-menerus bersamaan
- Setelah 20 menit, suhu aktual Termometer adalah 38,0°C. Tekan tombol suhu “▲” atau “ ▼ ”, ubah nilai “Adjtemp” hingga mencapai 38,0, lalu tekan tombol “stop/start” untuk mengonfirmasi.

Kemudian naik ke 100,0°C secara otomatis dan “*” berkedip tanpa henti.
- Ketika suhu praktis mencapai 100,0, tanda “ADJ” dan “ ” berkedip bersamaan tanpa henti.
- Setelah 20 menit, suhu aktual Termometer adalah 98,0°C. Tekan tombol suhu “▲” atau “ ▼ ”, ubah nilai “Adjtemp” hingga mencapai 98,0. Lalu tekan tombol “stop/start” untuk mengonfirmasi.




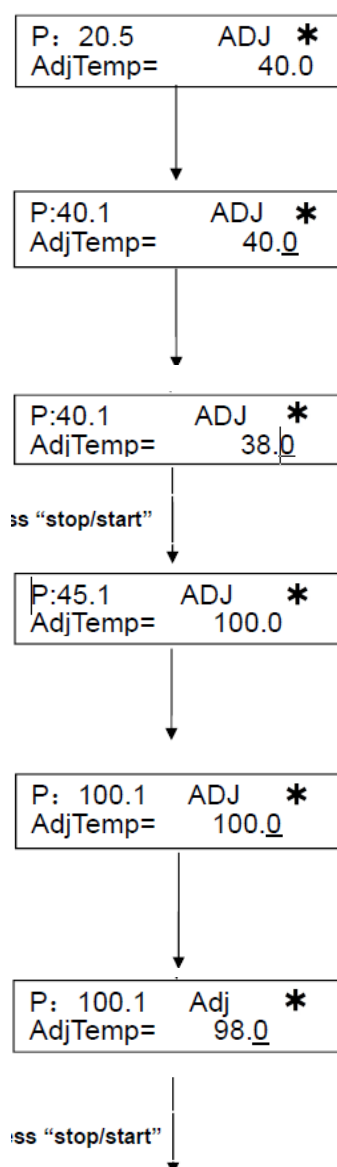


Setelah kalibrasi Suhu, suhu yang ditampilkan sama dengan suhu praktis blok.

S1	30.0	0 00:00
S1	50.0	1400 3:00

2.1.7. CARA MENUKAR BLOCK

- Buka tutup transparan dan tarik keluar keempat sekrup yang mengencangkan blok ke papan pemanas dengan obeng.
- Melepas sekrup, menutup tutupnya, mengeluarkan blok dari mesin utama
- Ambil blok model lain, letakkan secara perlahan di samping mesin utama. Lubang pemasangan blok diarahkan secara konsisten dengan lubang pemasangan mesin utama.
- Pasang sekrup ke lubang pemasangan, kencangkan blok logam pada instrumen dengan kunci pas.

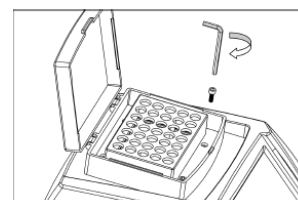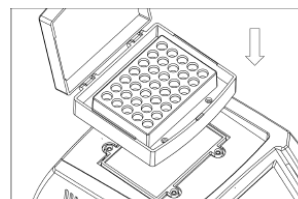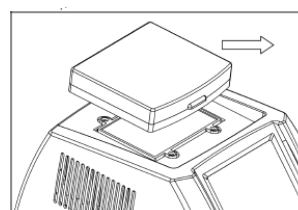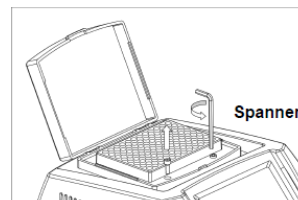

2.2 PENJELASAN & PENANGANAN FUNGSI ERROR

Untuk menangani kesalahan dan mengetahui peringatan yang terjadi pada produk. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Daftar Pesan Kesalahan

No.	Masalah	Sebab	Koreksi
1.	Tidak ada sinyal pada layar saat dihidupkan.	Tidak ada daya	Periksa Daya
		Fuse Rusak	Ganti Fuse dengan Fuse Baru (250V 3A 5x20)
		Sakelar Rusak	Ganti Sakelar
		Lain – lain	Kontak Penyedia/Distributor
2	Suhu aktual dan yang ditampilkan cukup berbeda.	Sensor Rusak	Kontak Penyedia/Distributor
3	“BUKA” pada tampilan suhu dengan alarm “du...”	Sensor suhu rusak atau suhu lingkungan di bawah nol	Kontak Penyedia/Distributor
4	“SHORT” pada tampilan suhu dengan alarm “du...”	Sensor suhu rusak atau suhu lingkungan di bawah nol	Kontak Penyedia/Distributor

	Tidak ada pemanasan atau pendinginan	Sensor rusak atau Modul TE rusak	Kontak Penyedia/Distributor
	Tekan tidak valid	Sakelar film rusak	Kontak Penyedia/Distributor

BAB 3 PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

3.1 TATA CARA PEMBERSIHAN PRODUK

Produk harus dibersihkan dari waktu ke waktu. Untuk melindungi produk dari kerusakan, harap perhatikan hal-hal berikut:

- Sebelum sterilisasi dan pembersihan, matikan catu daya dan suplai gas medis terlebih dahulu.
- Gunakan kain kering yang lembut atau kain lembut untuk membersihkan produk.
- Bersihkan produk menggunakan alkohol medis atau didesinfeksi dengan sinar ultraviolet.
- Simpan produk dan komponen di lokasi yang bersih dan aman.
- Jangan gunakan pembersih abrasif atau volatil, bensin, pengencer atau pelarut serupa untuk membersihkan produk.
- Jangan membersihkan produk dan komponen apa pun dengan merendamnya dalam air.
- Untuk memastikan keandalan fungsi *Thermo Shaker incubator*, perbaikan, pemeliharaan, dan perombakan peralatan harus dilakukan secara ketat oleh operator profesional perusahaan kami yang disetujui oleh perusahaan.
- Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh pabrikan akan membatalkan garansi produk. Jangan membongkar atau mencoba memperbaiki produk atau komponen.

Jika Anda tidak berencana untuk menggunakan produk untuk jangka waktu yang lama, kami sarankan menyimpannya dalam kemasan asli di tempat yang kering. Selama penyimpanan, jangan letakkan benda apa pun pada produk. Simpan produk dan jauhkan dari anak-anak dan lepas baterai dari produk.

BAB 4 KONSULTASI DAN PELAYANAN

Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur. Sebagai bentuk kepedulian, kami menyediakan layanan konsultasi produk dan perbaikan produk.

Jika Anda memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami secara langsung untuk layanan, silakan hubungi :

Distributor :

PT GeneCraft Labas

Meruya Utara, Jakarta 11620 - Indonesia

(Hotline : (021) 5890 3119)

Manufaktur :

PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur

Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia

(Hotline : 0818-0388-8993)